

ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

Document ID	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
Effective date	17 May 2019	
Version	1	Page page 1 of 8


1. DOEL

Het doel van dit document is het maken van een instructie voor het verpakken en relabellen van de doosjes vijlen. Met andere woorden, dezelfde vijlen worden omgepakt naar een ander nieuw label. Lotnummers, artikelnummers etc. blijven gelijk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe partij.

2. INSTRUCTIE

STAP 0	ALGEMEEN
---------------	-----------------

Het is niet noodzakelijk om handschoenen te dragen tijdens deze werkzaamheden.

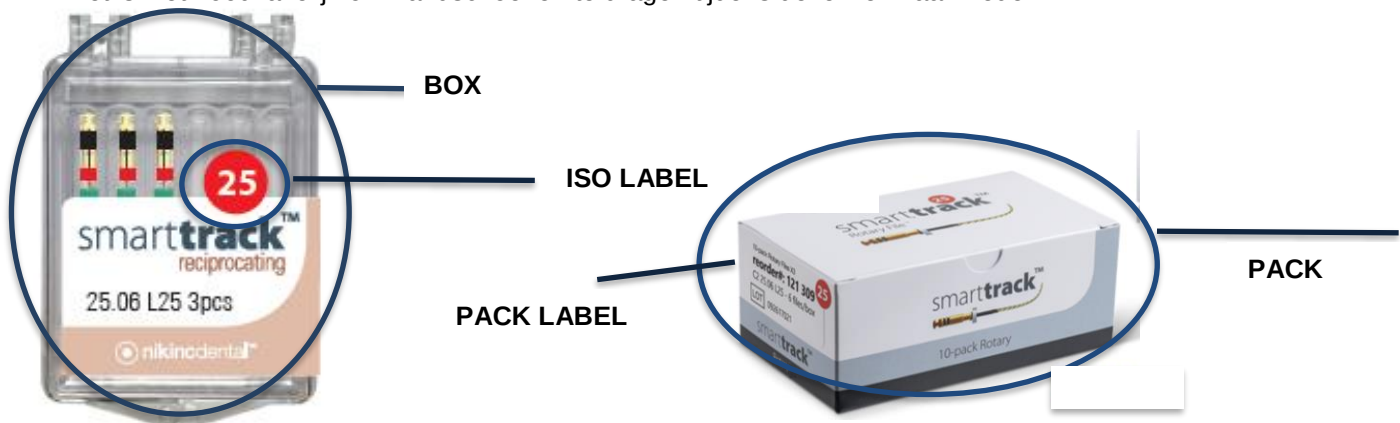

STAP 1	VUL ND032-A1 in (Relabel files form)
---------------	---

De vijlen zitten verpakt in een doos met daarin alle benodigde informatie en nieuwe labels. Op de doos staat alle benodigde informatie om het formulier in te vullen. Let op! Voor elk lotnummer, dien je 1 formulier in te vullen. Degene die als laatste de producten checkt, tekent het formulier af.

STAP 2	VERWIJDER LABEL EN GOOI OVERIGE MATERIALEN DIRECT WEG
---------------	--

Verwijder het label zoals deze momenteel om de verpakking zit. Gooi de packs, box labels en oude instructie ook direct weg.

ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

Document ID	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
Effective date	17 May 2019	
Version	1	Page page 2 of 8

STAP 3 PLAK DE NIEUWE LABELS OP BOXES

- 1) Plaats deze zodat de tochtstrip niet zichtbaar* is.
- 2) Zorg dat de kleur van de vijlen wel goed zichtbaar** is.
- 3) Plak het etiket exact*** zoals op onderstaande foto..



*Tolerantie tochtstrip:



NIET ACCEPTABEL

Te veel tochtstrip is zichtbaar aan de bovenzijde van het label. Dan liever het etiket iets hoger plaatsen zodat dit niet meer zichtbaar is. LET OP! Te allen tijde moeten de kleuren van de vijl zichtbaar blijven.

ACCEPTABEL Dat er aan de zijkant nog wat tochtstrip zichtbaar is, is acceptabel. Liever niet, maar soms onontkomelijk.



ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External


Document ID	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
Effective date	17 May 2019	
Version	1	Page page 3 of 8

****Tolerantie zichtbaarheid kleur van de vijlen:**



***** Tolerantie hoe je het etiket plakt.**

Plak het etiket zoals op de afbeelding hieronder.

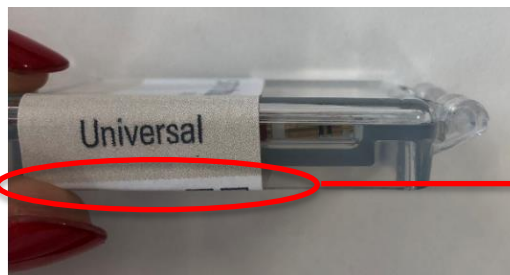

NIET ACCEPTABEL
Te schuin. De labels
dienen recht op de
boxes te worden
geplakt.



ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

<i>Document ID</i>	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
<i>Effective date</i>	17 May 2019	
<i>Version</i>	1	<i>Page</i> page 4 of 8

STAP 4 KLEINE ISO-STICKER PLAATSEN

Kleine ISO_sticker plaatsen tussen de letters A en C (indien SmartTrack).



LET OP! Voor SmartTrack gebruik je altijd de ronde ISO stickers. Zorg er ook voor dat de stickers niet schuin zitten maar recht.

1) Kies de benodigde kleur sticker:

Assorti (Verschillende vijlen in een doos) = Grijs sticker, A
 25.12 NX (Goude kleine vijl) = Grijs sticker, O
 17 (Paarse vijl) = Paarse sticker, 17
 17 (Witte vijl) = Witte sticker, 17
 20 (Gele vijl) = Gele sticker, 20
 25 (Rode vijl) = Rode sticker, 25
 30 (Blauwe vijl) = Blauwe sticker, 30
 35 (Groene vijl) = Groene sticker, 35
 40 (Zwarte vijl) = Zwarte sticker, 40

2) Plak deze sticker recht op de box.



ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

<i>Document ID</i>	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
<i>Effective date</i>	17 May 2019	
<i>Version</i>	1	<i>Page</i> page 5 of 8



Te scheef.

STAP 5 PLAATS DE BOXES IN EEN PACK

De boxes dienen in hoeveelheden van 10 stuks in een pack te worden geplaatst. Indien je minder dan 10 boxes van 1 lotnummer hebt, verpak je deze per 5 stuks met een elastiekje. En kun je doorgaan naar stap 10.

STAP 6 VOUW DE OMDOOS

Zet de bodem in elkaar

STAP 7 10 BOXES IN OMDOOS PLAATSEN

Plaats vier boxes (links) op elkaar en vervolgens 6 boxes (rechts van de 4) op de kant.



ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

<i>Document ID</i>	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
<i>Effective date</i>	17 May 2019	
<i>Version</i>	1	<i>Page</i> page 6 of 8

STAP 8 GEBRUIKSAANWIJZING BIJVOEGEN

Voeg handleiding toe en sluit doos.



LET OP! Er zijn verschillende gebruiksaanwijzingen. Kijk dus goed dat je de juiste gebruiksaanwijzing

STAP 9 STICKERS OP DE PACKS/OMDOOS

- 1) Plak op de bovenkant van de omdoos een kleine sticker tussen de A&C van Track.





- 2) Plak op de blanco zijkant, het pack label.



ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

<i>Document ID</i>	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
<i>Effective date</i>	17 May 2019	
<i>Version</i>	1	<i>Page</i> page 7 of 8

- 3) Plak vervolgens op dit label rechtsboven een kleine ISO sticker voor typeaanduiding. Deze sticker dient recht op het etiket te worden geplakt.

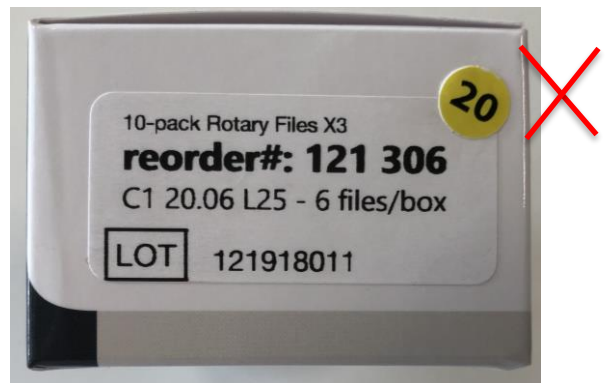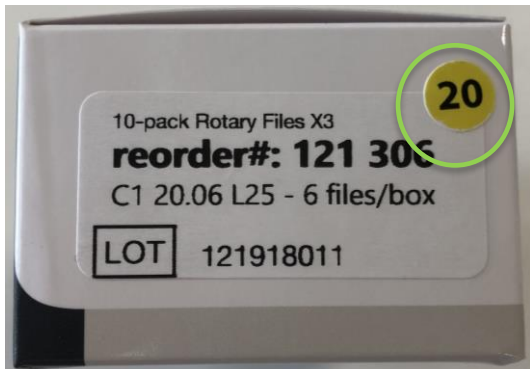

STAP 10	VUL ND032-A1 in (Relabel files form_external)
----------------	--

Vul de overige informatie in het formulier in en zorg dat alle labels zijn toegevoegd. Sla dit formulier op volgens instructies supplier en retourneer de originele documenten aan Nikinc Dental. Degene die als laatste de producten checkt, tekent het formulier af.

STAP 10	RETOURNEREN ARTIKELEN
----------------	------------------------------

Wanneer je klaar bent met 1 serienummer, dien je de tafel eerst opnieuw schoon te maken voordat je begint met een nieuwe serie. De afgeronde producten worden retourneerd zoals afgeleverd. Per artikelnummer in doos en per lotnummer in gescheiden zakje.

Losse doosjes worden per 5 stuks verpakt met een elastiekje.

ND032 – Werkinstructie herverpakken en Relabellen SmartTrack Files External

<i>Document ID</i>	ND032-Werkinstructie herverpakken en Relabeling SmartTrack Files_External v1	© Nikinc Dental B.V.
<i>Effective date</i>	17 May 2019	
<i>Version</i>	1	<i>Page</i> page 8 of 8

3. REFERENTIE DOCUMENTEN

<i>Code</i>	<i>Description</i>
ND032a1	Relabel files form _external

4. DOCUMENT HISTORY

<i>Version</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>	<i>Description of changes</i>
1	21 May 2019	Initial Release

5. AUTHORIZATION PAGE

<i>Author name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>
Jeske Dielissen	SMM		
<i>Reviewer name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>
N/A			
<i>Approver name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>
Frank Verhoeven	QM		