

ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 1 of 10

1. DOEL


Doel van deze instructie is om inzicht te geven hoe Pathmax en Pathmax Pro vijlen moeten worden verpakt en worden gelabeld.

2. INSTRUCTIE

STAP 1	ALGEMEEN
--------	----------

Let goed op de volgende algemene factoren:

- Let goed op dat je de Pathmax Pro vijlen in een Pathmax Pro omdoos plaatst met bijbehorende Pathmax Pro gebruiksaanwijzing. Alle labels, boxes, packs worden als 1 pakket aangeleverd.
- Voordat je de tochtstrip plaatst, zorg ervoor dat alle vijlen omhoog geschoven zijn in de box zodat de kleurtjes op de vijlen goed zichtbaar zijn wanneer de box gesloten en gelabeld is.
- Het is niet noodzakelijk om handschoenen te dragen tijdens deze werkzaamheden.

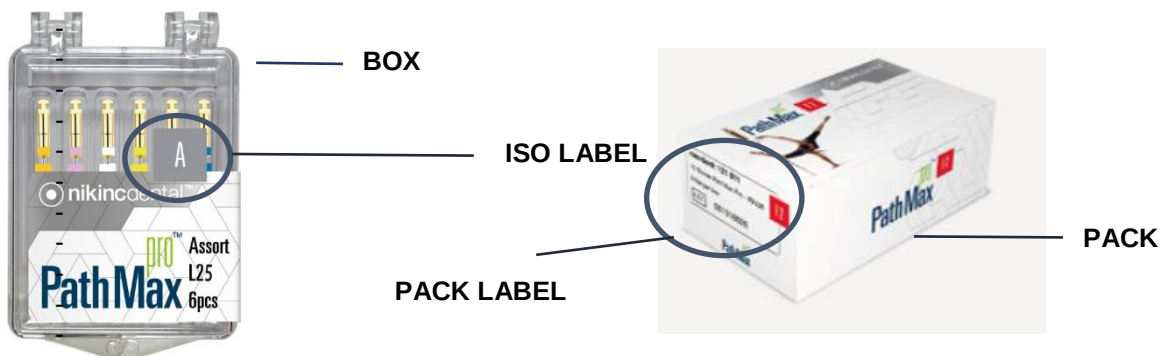

STAP 2	BOXES OPENEN
--------	--------------

Boxes openen per lotnummer.



ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 2 of 10

STAP 3 FOAM VERWIJDEREN



STAP 4 TOCHTSTRIP PLAATSEN

Zorg ervoor dat de vijlen bovenaan in de doos liggen.



STAP 5 PLAK DE NIEUWE LABELS OP BOXES

- 1) Plaats deze zodat de tochtstrip niet zichtbaar* is.
- 2) Zorg dat de kleur van de vijlen wel goed zichtbaar** is.
- 3) Plak het etiket exact*** zoals op onderstaande foto..



ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 3 of 10

*Tolerantie tochtstrip:



ACCEPTABEL Dat er aan de zijkant nog wat tochtstrip zichtbaar is, is acceptabel. Liever niet, maar soms onontkomelijk.

NIET ACCEPTABEL

Te veel tochtstrip is zichtbaar aan de bovenzijde van het label. Dan liever het etiket iets hoger plaatsen zodat dit niet meer zichtbaar is. LET OP! Te allen tijde moeten de kleuren van de vijl zichtbaar blijven.



**Tolerantie zichtbaarheid kleur van de vijlen:



ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 4 of 10

*** Tolerantie hoe je het etiket plakt.

Plak het etiket zoals op de afbeelding hieronder.



NIET ACCEPTABEL
Te schuin. De labels dienen recht op de boxes te worden geplakt.



STAP 6 KLEINE ISO-STICKER PLAATSEN

Kleine ISO_sticker plaatsen ter hoogte van het witte 'puntje/berg' in het etiket.



ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 5 of 10

LET OP! Voor Pathmax gebruik je altijd de vierkante ISO stickers. Zorg er ook voor dat de stickers niet schuin zitten maar recht.

1) Kies de benodigde kleur sticker:

Assorti (Verschillende vijlen in een doos) = Grijs sticker, A
 SX (Goude kleine vijl) = Oranje sticker, SX
 S1 (Paarse vijl) = Paarse sticker, S1
 S2 (Witte vijl) = Witte sticker, S2
 F1 Gele vijl) = Gele sticker, F1
 F2 (Rode vijl) = Rode sticker, F2
 F3 (Blauwe vijl) = Blauwe sticker, F3
 F4 (Zwarte vijl) = Zwarte sticker, F4
 F5 (Zwarte vijl) = Gele sticker, F5

2) Plak deze sticker recht op de box.



ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 6 of 10



Te laag

Te veel naar links

Te scheef

STAP 7 PLAATS DE BOXES IN EEN PACK

De boxes dienen in hoeveelheden van 10 stuks in een pack te worden geplaatst. Indien je minder dan 10 boxes van 1 lotnummer hebt, verpak je deze per 5 stuks met een elastiekje. En kun je doorgaan naar stap 13.

STAP 8 VOUW DE OMDOOS

Zet de bodem in elkaar

STAP 9 10 BOXES IN OMDOOS PLAATSEN

Plaats vier boxes (links) op elkaar en vervolgens 6 boxes (rechts van de 4) op de kant.



ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

<i>Document</i>	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
<i>Date</i>	23th May 2019		
<i>Version</i>	1	<i>Pages</i>	page 7 of 10

STAP 10 GEBRUIKSAANWIJZING BIJVOEGEN

Voeg handleiding toe en sluit doos.



LET OP! Er zijn verschillende gebruiksaanwijzingen. Kijk dus goed dat je de juiste gebruiksaanwijzing toegevoegd.

STAP 11 STICKERS OP DE PACKS/OMDOOS

- 1) Plak op de bovenkant van de omdoos een kleine ISO sticker links recht onder in het onderste grijze hoekje.




ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

Document	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
Date	23th May 2019		
Version	1	Pages	page 8 of 10

- 2) Plak op de zijkant (onder het nikinc dental logo) de fabriekssticker met de adresgegevens. Plak deze in het middel onder het logo.




- 3) Plak op de andere zijkant, het pack label. Dit is de zijkant met het pathmax pro logo. Plak deze ter in het midden.

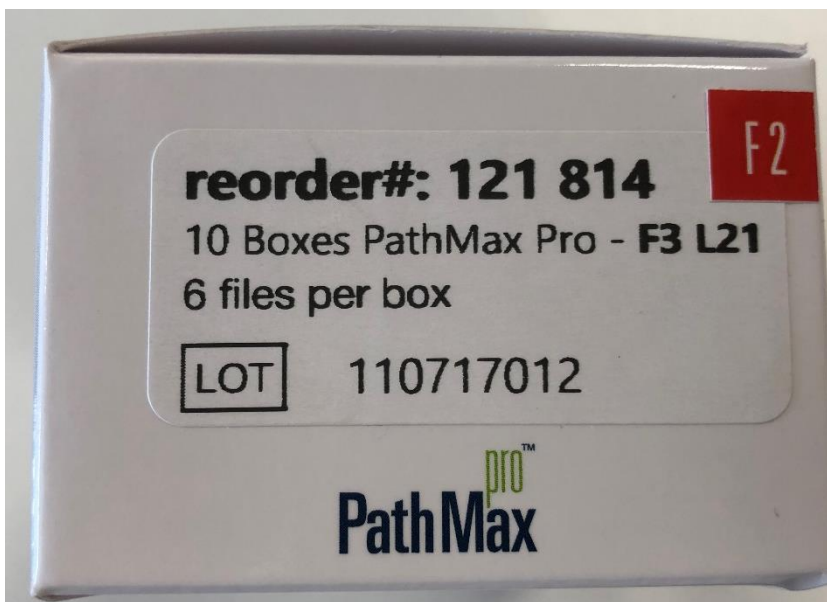

ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

<i>Document</i>	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
<i>Date</i>	23th May 2019		
<i>Version</i>	1	<i>Pages</i>	page 9 of 10

- 4) Plak vervolgens op dit label rechtsboven een kleine ISO sticker voor typeaanduiding. Deze sticker dient recht op het etiket te worden geplakt.

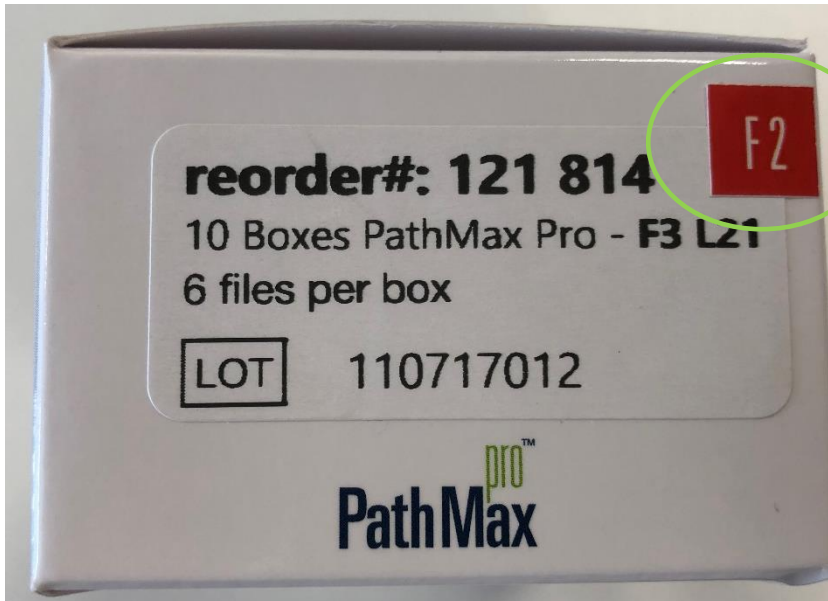

STAP 12	VUL ND041-A1 in (Label files form_external)
----------------	--

Vul de overige informatie in het formulier in en zorg dat alle labels zijn toegevoegd. Sla dit formulier op volgens instructies supplier en retourneer de originele documenten aan Nikinc Dental. Degene die als laatste de producten checkt, tekent het formulier af.

STAP 13	RETOURNEREN ARTIKELEN
----------------	------------------------------

Wanneer je klaar bent met 1 serienummer, dien je de tafel eerst opnieuw schoon te maken voordat je begint met een nieuwe serie. De afgeronde producten worden retourneerd zoals afgeleverd. Per artikelnummer in doos en per lotnummer in gescheiden zakje.

Losse doosjes worden per 5 stuks verpakt met een elastiekje.

ND042 – Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External

<i>Document</i>	ND042-Werkinstructie Verpakken en Labelen Pathmax (Pro) Files_External v11	© 2018 Nikinc Dental B.V.	
<i>Date</i>	23th May 2019		
<i>Version</i>	1	<i>Pages</i>	page 10 of 10

3. REFERENTIE DOCUMENTEN

<i>Code</i>	<i>Description</i>
ND041a1	Label files form_external

4. DOCUMENT HISTORY

<i>Version</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>	<i>Description of changes</i>
1	23 May 2019	Initial Release

5. AUTHORIZATION PAGE

<i>Author name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>
Jeske Dielissen	SMM		

<i>Reviewer name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>
N/A			

<i>Approver name</i>	<i>Title</i>	<i>Signature</i>	<i>Date [d mmm yyyy]</i>
Frank Verhoeven	QM		